

OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Alteração de Parafusos Para Kit de Acabamento dos Braços

Informamos que os parafusos dos Kits de Acabamento de Apoio de Braço foram substituídos conforme abaixo (válido a partir de 26/01/2021):

- Kit Acabamento Apoio do Braço Fixo (9303171):

2 un. do "Parafuso Sextavado Interno Cabeça Abaulada M5x25 mm CR (8001913)" por 2 un. "Parafuso Allen Cabeça Abaulada M5x16 mm CR (5201888)";

- Kit Acabamento Apoio do Braço Direito Escamoteável (cód. 9303172):

2 un. do "Parafuso Sextavado Interno Cabeça Abaulada M5x25 mm CR (8001913)" por 1 un. do "Parafuso Allen Cabeça Abaulada M5x16 mm (5201888)" e 1 un. do "Parafuso Allen Cabeça Abaulada M5x20 mm (5201887)";


- Kit Acabamento Apoio do Braço Escamoteável (cód. 9303173):

2 un. do "Parafuso Sextavado Interno Cabeça Abaulada M5x25 mm CR (8001913)" por 2 un. do "Parafuso Allen Cabeça Abaulada M5x20 mm (5201887)";

- Kit Acabamento Apoio do Braço Infinity (cód. 9303175):

2 un. do "Parafuso Sextavado Interno Cabeça Abaulada M5x25 mm CR (8001913)" por 1 un. do "Parafuso Allen Cabeça Abaulada M5x16 mm (5201888)" e 1 un. do "Parafuso Sextavado Interno Cabeça Abaulada M5 x 25 mm CR (8001913)".

Composição dos Kits:

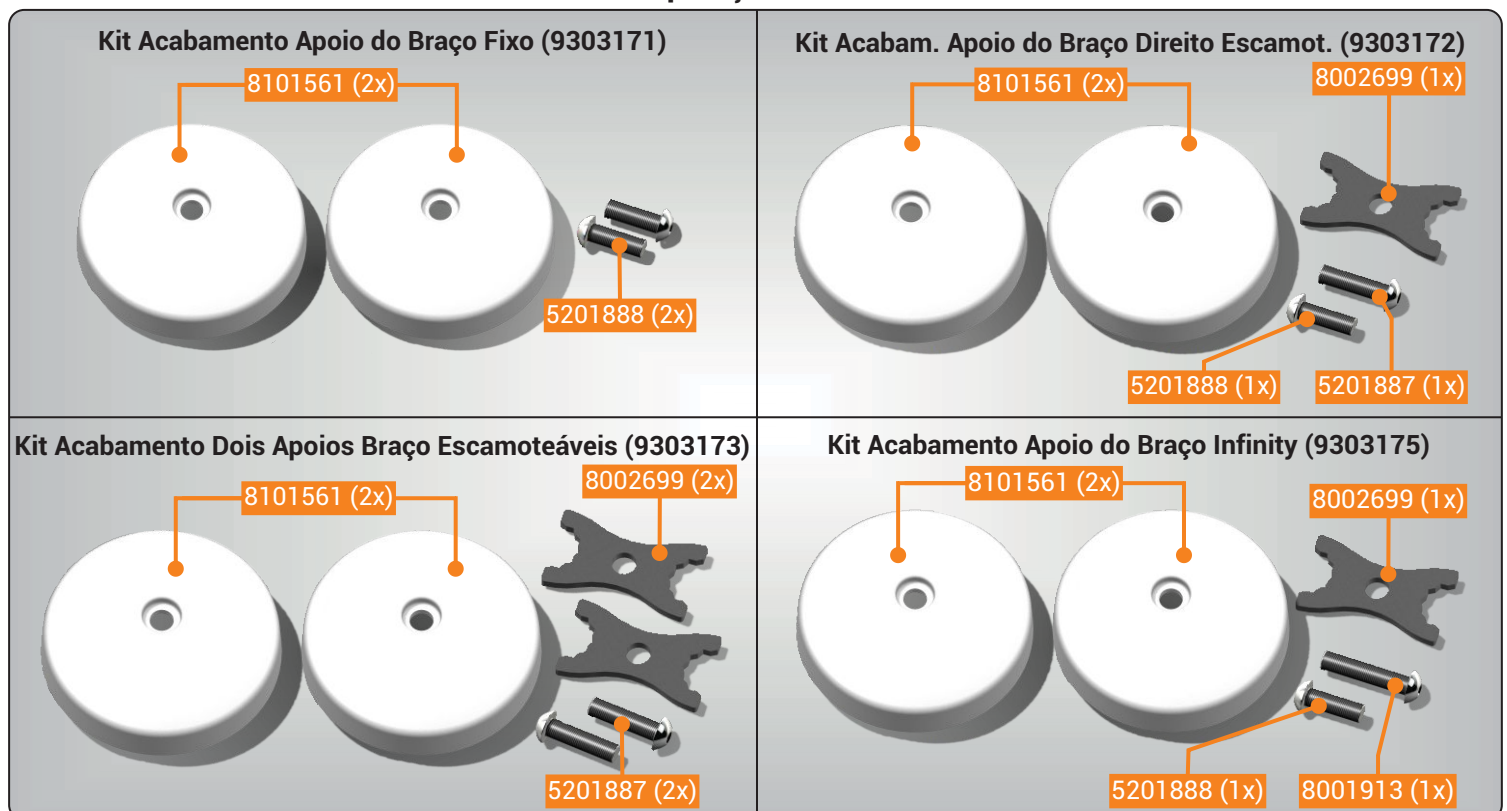

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 3295-20 / Revisão 00 - 10 de Fevereiro de 2021